

歯科医
推奨

将来の健康と発達につながる 教育用こども歯ブラシ

乳幼児からの正しい歯磨き習慣は、
将来の健康や手先の発達にもつながります。
しかし歯磨きをはじめて間もない頃は、
歯ブラシを口に入れることに抵抗を感じるため、
まず「歯ブラシに興味を持つ」ことから
スタートすることが大切です。

★ BabySmile Rainbowシリーズは、
そんなお子さまのために誕生しました。
キラキラ輝くレインボーライトや
正しい持ち方を促すグリップ設計等、
小さなうちから正しい歯磨き習慣が
自然に身に付く仕掛けが満載です。
★
お子さまのやる気を引き出し、
将来につづくお口の健康をサポートします。

電動歯ブラシの使い方・磨き方

① ブラシを動かさない

電動歯ブラシは手磨きのようにブラシを動かす必要はありません。毛先を歯の表に当て、少しずつずらしながら歯垢を除去します。

② 軽い力で歯の表面に当てる

強い力で歯に押し付けると、歯茎を傷つけてしまう恐れがあります。軽い力でやさしく磨きましょう。



③ ブラシの角度を意識する


歯と歯の隙間や歯茎のキワや、舌側面に対しては斜め45°の角度で、咬合面については噛み合わせる面や頬側面に対して垂直にあてます。



別売・オプション部品一覧

ご購入は、公式オンラインショップにて承っています。

専用替えブラシ2本セット
S-204RB S-204HB

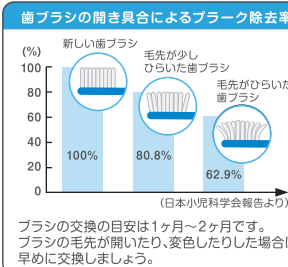

歯磨きジェルS-221

歯ブラシホルダーS-414
(対象商品 S-205・S-206)



ご購入はこちら

WEB

ベビースマイルレインボー

検索



公式オンライン
ショップ



楽天市場店



Yahoo!
ショッピング店



Amazon

お客様サービスセンター

☎ 03-4511-8855

(9:00 ~ 18:00まで 土日祝日を除く)



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス21階
Tel: 03-6711-5500 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp

Rainbow-A-01



教育用こども歯ブラシ

BabySmile Rainbow

楽しく、正しく、しっかり
歯磨きできる機能がいっぱい!



NEW

正しく持てる
ペングリップ式



キラキラ
虹色ラメ入り!





七色に光る

電動

電池式

BabySmile Rainbow s-206



七色に光る

電動

USB充電

BabySmile Rainbow 3+ s-205



自分で歯磨きをはじめる頃から

ラメ

手動

BabySmile Rainbow 3+ E-101



七色に光り
歯磨きを楽しく
習慣化!



英語のボイスで応援!

Keep going♪
Good job!

専用の替えブラシに交換できて
繰り返し使える



※S-206、S-205共通

ウサギ型のラメを
探そう!



新発売

ペングリップ式



お子さまの歯磨きデビュー
白色LEDで簡単仕上げ磨き!

応援ボイス&サウンドで
自分で磨くやる気を育む。

正しく持てて、上手に磨ける
歯磨きを習慣化!

色が選べる

カラフルストップ

お子さまの好きな色で
歯磨きデビュー。



超やわらか毛

ブラシヘッド

傷つきやすい乳歯にも
やさしい、超やわらか
毛。0歳から(上の前歯
が生えたら)ご使用い
ただけます。

正しく持てる

ペングリップ式

歯科医の推奨する歯ブ
ラシの正しい持ち方
「ペングリップ」が自然
に身に付きます。

楽しく磨ける

応援ボイス&サウンド

約15秒ごとに英語の応
援ボイスが流れます。
ボイスの間には楽し
いサウンドも搭載し、お
子さまのやる気を育み
ます。

やわらか毛

ブラシヘッド

3歳頃からのお子さま
の歯に適したやわらか
なブラシで、乳歯のエナ
メル質を傷つけません。

正しく持てる

ペングリップ式

歯科医の推奨する歯ブ
ラシの正しい持ち方
「ペングリップ」が自然
に身に付きます。

ウサギ型ラメを探そう

キラキラ虹色ラメ

柄の部分は、きれいな
虹色のラメがフロー
ティングします。ウサギ
型のラメをお子さま
と見つけてください。

やわらか毛

ブラシヘッド

乳歯のエナメル質を傷
つけないやわらかブラ
シ。専用替えブラシに交
換できるので、本体部分
は繰り返し使えます。

正しく持てる

ペングリップ式

歯科医の推奨する歯ブ
ラシの正しい持ち方
「ペングリップ」が自然
に身に付きます。