


ブラシの装着方法



ブラシヘッドを本体に差し込み、90°まわして固定します。
※無理に力を入れないでください。破損およびケガの原因となります。

ブラシの取外し方法

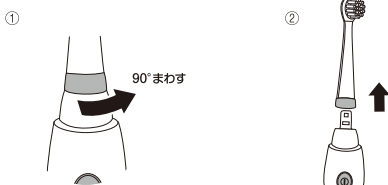

ブラシヘッドを持って90°まわし、そのまま上へ引き抜きます。

電池の交換方法



本体の中心部と下部を図のよう
に持って、本体下部を矢印と反
対方向にひねって電池カバーを
開きます。
使用済みの電池を取り外しなが
らになるように電池を入れ、再
びカバーを閉めてください。


■洗浄・保管方法

- 本体部分は絶対に水に濡れないでください。故障の原因になります。
- ブラシ部分および本体に付着した汚れは、水またはぬるま湯でよく洗ってください。
- ブラシの取付軸にたまつた汚れは、ブラシを外して、水またはぬるま湯でよく洗い落としてください。その後、必ず水をよくふき取ってください。
- ブラシ部分が本体から取り外しにくい場合は、本体部分が変形しない程度の水または40℃以下のぬるま湯にしほらく濡れてください。

▲注意

- ブラシは消耗品です。毛先が広がったり摩擦によりぐらつきが大きくなってきたら交換してください。
- 変色、変形の恐れがありますので洗浄には水・ぬるま湯以外を使用しないでください。
- 電子レンジで殺菌をしないでください。本体や歯ブラシが破損しケガの原因があります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- 本体内部に水が入ると故障の原因となります。

上手なブラシの持ち方

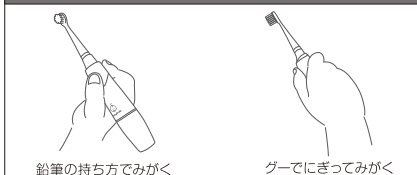

■使用上のご注意

- 本体を落とすなどの衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 充電式の電池は使用しないでください。
- 本体を直射日光にあてたり、火気そのほか近づけたり、熱湯をかけたらないでください。事故や故障の原因となります。
- 動いている歯ブラシを手で無理にとめないでください。故障やケガの原因となります。
- 本体を浴室などの水気の多い場所で使用・保管しないでください。また本体部分を長時間水に濡れないでください。
- 研磨剤が多く含まれているハミガキ粉は使用しないでください。歯や歯茎を傷める原因となります。

■安全上のご注意

- お子様が誤飲しないよう、使用・保管の際は十分にご注意ください。
- 電池の交換は大人の方が行ってください。また使用済み電池は放置せず、すぐに処分してください。
- 歯ブラシや付属品などを突きケガをする恐れがあります。歯ブラシを口に入れたまま歩き回らないしほらく十分にご注意ください。また替えブラシはお子様の手が届かないところに保管してください。
- お子様ひとりで使用したり、歯ブラシを口に入れたまま歩き回ると、のどを突くなど重大な事故に繋がる恐れがあります。十分にご注意ください。必ず保護者の方が付き添ってください。
- ブラシを強く噛むと、毛が抜ける、折れる、ブラシが外れるなどして歯や歯茎を傷つけたり、誤飲する恐れがあります。またご使用のたびにブラシを確認し、激しく毛が飛び出ている場合は新しいものとお取替ください。
- マッサージヘッドを強く噛んだり、引っ張ったりすると切れてしまうことがありますので、必ず保護者の方が目を離さず付き添ってください。
- 入浴時にはお使いにならないでください。
- 歯茎に歯ブラシを強く当てすぎないでください。歯茎を傷めることがあります。
- 電池と替えブラシの取り付け、取り外しは必ず大人の方が行ってください。
- 使用前にブラシが確実に取り付けられていることを確認してください。
- 高品質を分解、修理、改造等しないでください。火災、ケガ等の原因となります。
- 本書に記載の使用法、手入れ方法と異なる取り扱いをしないでください。
- 長期間ご使用にならないときは乾電池を取り外して保管してください。
- 使用推奨期限内の電池を使用してください。
- 本品はおもちゃではありません。
- 使用後はよく水洗いし、しっかりと乾燥させて風通しのよいところに保管してください。

■保証規定

- 保証期間はご購入後1年間です。
- 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- 取扱説明書、本体付属ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
- 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示のうえ、ご購入しお払いした販売店までご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償対応いたしかねます。
 - 誤った使用、不注意による故障または損傷の場合。
 - 保管の不備、ご使用者の責に帰せると認められる故障または損傷の場合。
 - 火災、地震、水害、落雷などの天災地災、指定外電池の使用などによる故障及び損傷。
 - 弊社の許可を受けることなく、修理や改造を行った場合。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書に販売店やお買い上げ日などの記載に不備がある場合、あるいは内容を書き換えられた場合。

■保証書

商品名	こども用電動歯ブラシ プラブラー レインボー for Baby S-203B		
お買い上げ年月日	年	月	日
ご購入者様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
販売店様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
製造販売元	シースター株式会社		

※製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

■お客様サービスセンター

077-531-0770 平日9:00～18:00
(土日祝日・夏期および年末年始休業を除く)