

BabySmile 小児用電動歯ブラシ

Rainbow™

※ 本書は品質保証書を兼ねています。大切に保管してください。

お客様各位


この度は、お買い上げいただきましてありがとうございました。安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

ブラシの動きと光る順番

スイッチを押すたびに歯ブラシの光り方と動きが変わります。


- ①レインボーライト
- ②カラフルストップ(好きな色でストップできます) & 振動
- ③白色LEDライト & 振動
- *②③は、30秒ごとに時間をお知らせする「ぶるっとタイマー」が作動します。
- *②③は、2分で自動停止します。

ブラシの着脱方法

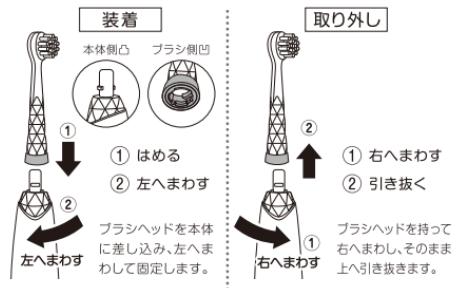

*無理に力を入れないでください。破損およびケガの原因となります。

電池の交換方法

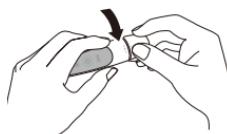

本体の中心部と下部を図のように持ち、本体下部を矢印の方向にひねって電池カバーを開きます。
使用済みの電池を取り外し、+(プラス)が下になるように電池をいれ、再びカバーを閉めてください。

■ 洗浄・保管方法

- ・本体部分は絶対に水に浸けないでください。故障の原因になります。
- ・本体に付着した汚れは、固く絞った布等で拭き取ってください。
- ・ブラシ部分の汚れは、水またはぬるま湯でよく洗ってください。
- ・ブラシの取付軸にたまたま汚れは、ブラシを外して、水またはぬるま湯でよく洗い落としてください。その後、必ず水気をよくふきとってください。
- ・ブラシ部分が本体から取り外しにくい場合は、本体部分が浸からない程度の水または40℃以下のぬるま湯にしばらく浸けてください。

⚠ 注意

- ・ブラシは消耗品です。毛先が広がったり摩擦によりぐらつきが大きくなったら交換してください。
- ・変色、変形の恐れがありますので戦場には水・ぬるま湯以外を使用しないでください。
- ・電子レンジで殺菌をしないでください。本体や歯ブラシが破損しケガをする恐れがあります。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- ・本体内部に水が入ると故障の原因となります。

■ 使用上の注意

- ・本体を落とすなどの衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・充電式の電池は使用しないでください。
- ・本体を直射日光にあてたり、火気のそばに近づけたり、熱湯をかけたりしないでください。事故や故障の原因になります。
- ・動いている歯ブラシを手で無理にとめないでください。故障やケガの原因になります。
- ・本体を浴室などの水気の多い場所で使用・保管しないでください。また本体部分を長時間水に浸けないでください。
- ・研磨剤が多く含まれているハミガキ粉は使用しないでください。歯や歯茎を傷める原因になります。

■ 安全上の注意

- ・お子様が誤飲しないよう、使用・保管の際は十分にご注意ください。
- ・電池の交換は大人の方が行ってください。また使用済み電池は放置せず、すぐに処分してください。
- ・歯ブラシや付属品でのぞき突きケガをする恐れがあります。歯ブラシを口に入れたまま歩き回るなどしないよう十分にご注意ください。また替えブラシはお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・お子様ひとりでは使用せず、必ず保護者の方が付き添ってください。
- ・ブラシを強く噛むと、毛が抜ける、折れる、ブラシが外れるなどして歯や歯茎を傷つけたり、誤飲する恐れがあります。ご使用のたびにブラシを確認し、激しく毛が飛び出している場合は新しいものとのお取替えください。
- ・入浴時にはお使いにならないでください。歯茎を傷めことがあります。
- ・歯茎に歯ブラシを強く当てすぎないでください。歯茎を傷めることができます。
- ・電池や替えブラシの取り付け、取り外しは必ず大人の方が行ってください。
- ・使用前にブラシが確実に取り付けられていることを確認してください。
- ・商品を分解、修理、改造等しないでください。火災、ケガ等の原因となります。
- ・本書に記載の使用方法、手入れ方法と異なる取り扱いはしないでください。
- ・長期間ご使用にならないときは乾電池を取り外して保管してください。
- ・使用推奨期限内の電池を使用してください。

■ 保証規定

1. 保証期間はお買い上げ後1年間です。
2. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
3. 取扱い説明書、本体付属ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
4. 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示のうえ、
お客様サービスセンターまでご連絡ください。
5. 保証期間内でも次の場合は無償対応いたします。
(イ)誤った使用、不注意による故障または損傷の場合。
(ロ)保管上の不備、ご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷の場合。
(ハ)火災、地震、水害、落雷などの天災地変、指定外電池の使用など
による故障及び損傷。
(ニ)弊社の許可を受けることなく、修理や改造を行った場合。
(ホ)本保証書の提示がない場合。
(二)本保証書に販売店やお買い上げ日などの記載に不備がある場合、
あるいは内容を書き換えられた場合。

■ 保証書

商品名	ベビースマイル レインボー S-206 / S-204
お買上げ年月日	年 月 日
ご購入者様	お名前 ご住所 電話番号
販売店様	お名前 ご住所 電話番号
製造販売元	シースター株式会社

■ お客様サービスセンター

☎ 03-4511-8855

平日9:00~18:00(土日祝日・夏期および年末年始休業を除く)