



ご使用前に必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

各部の名称

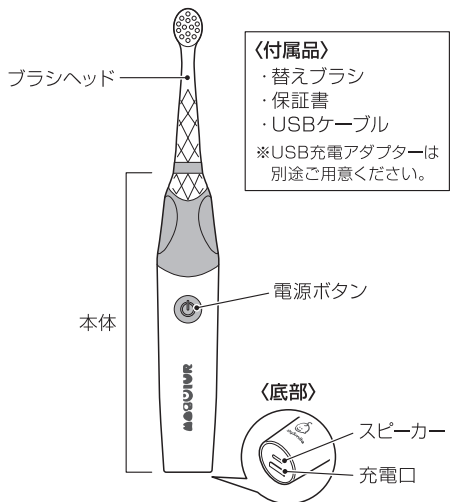


ブラシの着脱

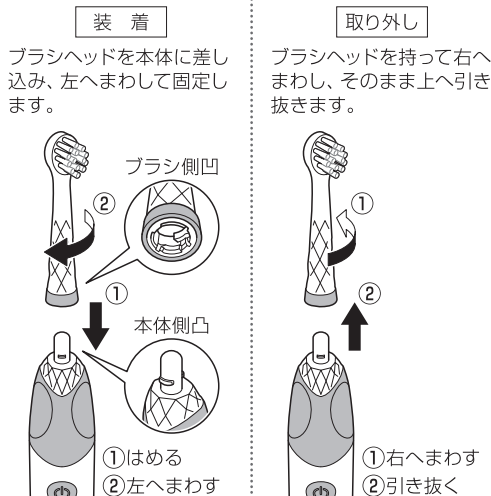


上手な歯ブラシの持ち方

親指、人差し指、中指を本体のくぼみ部に当てて握ります。

〈持ち方例1〉

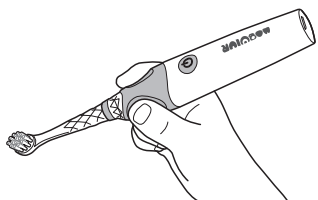

〈持ち方例2〉

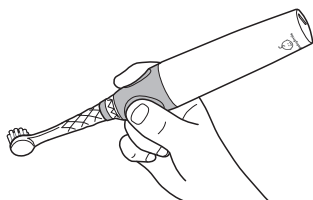

どの向きで握っても、くぼみ部に指を当てるだけで正しい持ち方が自然に身に付くガイドグリップを採用しました。

本体機能

電源ボタンを押すと振動がスタートしレインボーライトが点灯します。応援ボイスとサウンドが流れ、約1分間で自動停止します。


〈応援ボイスについて〉

本体動作中、約15秒ごとにお子様の歯磨きへのやる気を促す音声流れます。

音 の 流 れ	起動時	「Ready Go! (さあやろう)」
	15秒	「Good. Keep going. (いいね、その調子)」
	30秒	「Keep it up 30 more seconds. (あと30秒続けるよ)」
	45秒	「Let's brush the others. (反対側も忘れずに)」
	60秒	「Good job. (がんばったね)」

充電方法

USBケーブルを本体の充電口とUSB充電アダプターにつないでコンセントに差します。約90分間で満充電になり、約45日間(1日2回使用の場合)使用可能です。

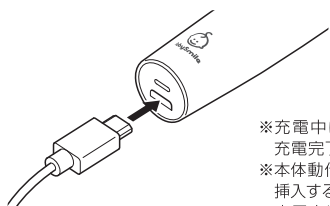

※充電中は白色LEDが点滅し、充電完了時には消灯します。
※本体動作中にUSBケーブルを挿入すると動作が停止します。
※充電中に電源を入れても動作しません。

■お手入れ

- 本体に付着した汚れは、固く絞った布等で拭き取ってください。
- ブラシ部分の汚れは、水またはぬるま湯でよく洗ってください。
- ブラシ部分の取付軸にたまった汚れは、ブラシを外して、水またはぬるま湯でよく洗い落としてください。その後、水気をよく拭き取ってください。
- ブラシ部分が本体から取り外しにくい場合は、本体部分が浸からない程度の水または40℃以下のぬるま湯にしばらく浸けてください。

〈お手入れ時のご注意〉

- 本体部分は絶対に水に浸けないでください。故障の原因になります
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- 本体内部に水が入ると故障の原因となります。
- 電子レンジや熱湯で殺菌をしないでください。本体やブラシが破損しケガをするおそれがあります。
- 洗浄には水・ぬるま湯以外を使用しないでください。変色のおそれがあります。

■使用上のご注意

- 本体を落とすなどの衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 本体を直射日光にあてたり、火気のそばに近づけたり、熱湯をかけたりしないでください。事故や故障の原因となります。
- 動いているブラシを手で無理に止めないでください。故障やケガの原因になります。
- 本体を浴室などの水気の多い場所で使用・保管しないでください。また本体部分を水に浸けないでください。
- ブラシは電源を切ってから装着してください。
- 充電口やUSBケーブルに水がかからないようにご注意ください。水がかかった場合はすぐに布で拭いて乾燥させてからご使用ください。

■安全上のご注意

- 濡れた手で本体やUSBケーブルに触らないでください。感電のおそれがあります。
- ブラシを口に入れたまま歩き回るなどしないよう十分にご注意ください。のどを突きケガをするおそれがあります。
- 本体および付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- ブラシなどの小さな部品をお子様が悪飲しないよう、使用・保管の際は十分にご注意ください。
- 事故防止のため、使用の際は必ず保護者の方が付き添ってください。
- 本体やUSBケーブルを分解、修理、改造等しないでください。火災、ケガ等の原因になります。
- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。廃棄の際は自治体のルールに従ってください。
- ブラシを強く噛むと、毛が抜ける、折れる、ブラシが外れるなどして歯や歯茎を傷つけたり、誤飲するおそれがあります。ご使用の度にブラシを確認し、激しく毛が飛び出ている場合は新しいものと取り替えてください。
- 入浴時にはご使用にならないでください。感電のおそれがあります。
- ブラシの取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。
- ご使用前にブラシが確実に取り付けられていることを確認してください。
- ご不要となった本体や付属品、別売品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。(環境汚染の原因となることがあります。)

別売品のご案内 (ブラシは消耗品です。ブラシの毛先が広がりはじめたら、交換をおすすめします。)

専用替えブラシは下記商品をお求めください。

ベビースマイルレインボー替えブラシ(かため) / S-204・S-205兼用

販売先) ベビースマイル公式ショップ(楽天・Amazon・PayPay) および取扱店舗

■製品仕様

商品名	ベビースマイルレインボー 3+ S-205
材質	本体: ABS/スチール ブラシ柄: PETG/TPE ブラシ毛: ナイロン
振動数	16,000回/分
サイズ	本体: 約直径23.6×H121mm 替えブラシ: 約 W10.7×H60.0×D12.5mm USBケーブル: 約 1m
電源	充電式(リチウムイオン電池)
重量	約41g(本体+ブラシ)

販売元 シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-8-40 A-PLACE品川
お客様サービスセンター 03-4511-8855 (平日9~18時)
(土日祝日・夏季および年末年始を除く)