

※ 本書は品質保証書を兼ねています。大切に保管してください。

..... お客様各位


この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

ブラシの動きと光る順番


スイッチを押すたびに歯ブラシの光り方と動きが変わります。

- ①レインボーライト
 - ②カラフルストップ（好きな色でストップできます）&振動
 - ③白色 LED ライト&振動
- ※②と③は、30秒ごとに時間をお知らせする「ぶるっとタイマー」が作動します。
 ※②と③は2分で自動停止します。

ブラシの着脱方法

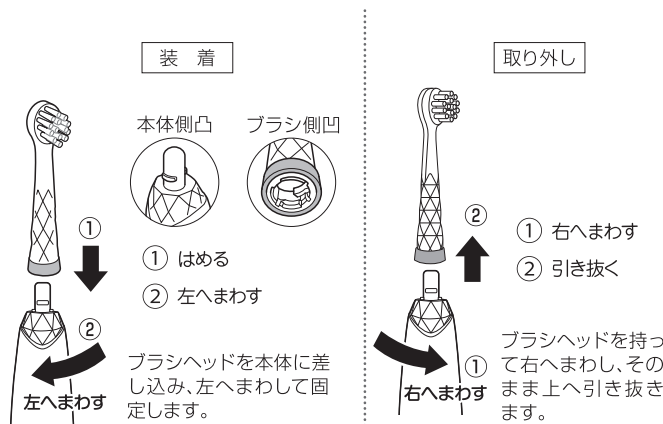

ブラシの着脱方法

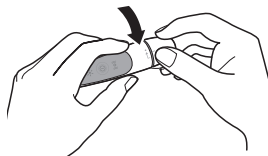

本体の中心部と下部を図のように持ち、本体下部を矢印の方向にひねって電池カバーを開きます。使用済みの電池を取り外し、+（プラス）が下になるように電池を入れ、再びカバーを開けてください。

※無理に力を入れないでください。破損およびケガの原因となります。

■ 洗浄・保管方法

- 本体部分は絶対に水に浸けないでください。故障の原因となります。
- 本体に付着した汚れは、固く絞った布等で拭き取ってください。
- ブラシ部分の汚れは、水またはぬるま湯でよく洗ってください。
- ブラシの取付軸にたまった汚れは、ブラシを外して、水またはぬるま湯でよく洗い落としてください。その後、必ず水気をよくふき取ってください。
- ブラシ部分が本体から取り外しにくい場合は、本体部分が浸からない程度の水または 40℃以下のぬるま湯にしばらく浸けてください。

⚠ 注意

- ブラシは消耗品です。毛先が広がったり摩擦によりぐらつきが大きくなってきたら交換してください。
- 変色、変形の恐れがありますので洗浄には水・ぬるま湯以外を使用しないでください。
- 電子レンジで殺菌をしないでください。本体や歯ブラシが破損しケガをする恐れがあります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- 本体内部に水が入ると故障の原因となります。

- 本体を落とすなどの衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 充電式の電池は使用しないでください。
- 本体を直射日光にあてたり、火気のそばに近づけたり、熱湯をかけたりしないでください。事故や故障の原因となります。
- 動いている歯ブラシを手で無理にとめしないでください。故障やケガの原因となります。
- 本体を浴室などの水気が多い場所で使用・保管しないでください。また
- 本体部分を長時間水に浸けないでください。
研磨剤が多く含まれているハミガキ粉は使用しないでください。歯や歯茎を傷める原因となります。

■ 安全上のご注意

- お子様が悪飲しないよう、使用・保管の際は十分にご注意ください。
- 電池の交換は大人の方が行ってください。また使用済み電池は放置せず、すぐに処分してください。
- 歯ブラシや付属品で、のどを突きケガをする恐れがあります。歯ブラシを口に入れたまま歩き回るなどしないよう十分にご注意ください。また替えブラシはお子様の手の届かないところに保管してください。
- お子様ひとりでは使用せず、必ず保護者の方が付き添ってください。
- ブラシを強く噛むと、毛が抜ける、折れる、ブラシが外れるなどして歯や歯茎を傷つけたり、誤飲する恐れがあります。ご使用のたびにブラシを確認し、激しく毛が飛び出ている場合は新しいものとお取替えください。
- 入浴時にはお使いにならないでください。
- 歯茎に歯ブラシを強く当てすぎないでください。歯茎を傷めることがあります。
- 電池や替えブラシの取り付け、取り外しは必ず大人の方が行ってください。
- 使用前にブラシが確実に取り付けられていることを確認してください。
- 商品を分解、修理、改造等しないでください。火災、ケガ等の原因となります。
- 本書に記載の使用方法、手入れ方法と異なる取り扱いはしないでください。
- 長期間ご使用にならないときは乾電池を取り外して保管してください。
- 使用推奨期限内の電池を使用してください。

別売品のご案内

専用替えブラシは下記商品をお求めください。（ブラシは消耗品です。ブラシの毛先が広がりはじめたら、交換をおすすめします。）
 ベビースマイルレインボー替えブラシ（かため）/ S-204・S-205・S-206 兼用
 歯ブラシがピタッと収まる、便利な専用ホルダーです。
 歯ブラシホルダー / S-205・S-206 兼用

[販売先](#) ベビースマイル公式ショップ（楽天・Amazon・PayPay）および取扱店舗

■ 製品仕様

| | | | |
|-----|---|---------------|-----------|
| 商品名 | ベビースマイルレインボー S-206 | | |
| 材質 | 本体：ABS/PETG/シリコン/TPE/スチール | ブラシ柄：PETG/TPE | ブラシ毛：ナイロン |
| 振動数 | 16,000回/分 | | |
| サイズ | 本体：約直径26×H115mm 替えブラシ：約 W10.7×H60.0×D12.5mm | | |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×1本（別売） | | |
| 重量 | 約33g（※電池を含まない） | | |

販売元 シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号品川シーズンテラス 21階
 お客様サービスセンター 03-4511-8855（平日9～18時）
 （土日祝日・夏季および年末年始を除く）