


ハンズフリー電動さく乳器 Neo E-408

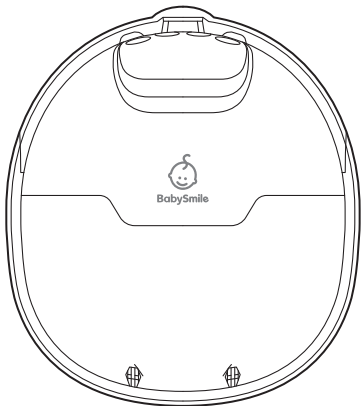

このたびは、「ハンズフリー電動さく乳器 Neo E-408」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、適切にご使用ください。
取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全にご使用いただくために、必ずお守りください。


警告サイン	説 明
	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号	説 明
	してはいけないこと（禁止）を示します。
	しなければならないこと（必ず守ること）を示します。

 警告	
	●本製品は充電式電池を搭載しております。直射日光の当たるところや高温・高湿・水のかかる場所・炎天下の車内・火の近くなどでは使用、充電、放置をしないでください。 発火・感電・故障の原因になります。
	●本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 破損・故障の原因になります。
	●乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。 予期せぬけがの原因になります。
	●USBケーブルや充電器の劣化があるときは使用しないでください。 発火・感電・故障の原因になります。
	●分解および改造をしないでください。 発火・感電の原因になります。
	●さく乳以外の目的で本製品を使用しないでください。 予期せぬけがの原因になります。


 注意	
	●溶剤や刺激の強い化学薬品で洗浄しないでください。 変形・破損の原因になります。
	●産後までは本製品を使用しないでください。 さく乳は陣痛を誘発するおそれがあります。授乳期間中に妊娠した場合は、使用を続ける前に医療機関などに相談してください。
	●本製品を複数人で使用しないでください。 本製品は1人用の製品です。複数人でご使用になると、感染など健康上のリスクが生じる可能性がありますので、共用はしないでください。
	●ミルク容器を傾けたり、規定用量を超えてさく乳したりしないでください。 （ミルク容器の最大容量ラインを超えないでください）
	●使用前・使用後は洗える部品を分解し、洗浄消毒を行ってください。
	●使用を終了する際は、必ず電源を切ってください。
	●分解・組み立ての際は、各部品の正しい組み立て順序に従ってください。
	●洗浄時には、小さな部品を紛失しないよう注意して取り扱ってください。
	●モーターに水や母乳が付いたら、すぐに乾いた清潔な布で拭き取ってください。 濡れたままにしておくと故障の原因になります。
	●吸引力はご自身の体の状態に合わせて調整してください。
	●痛みを伴う場合は直ちに使用を中止してください。
	●本製品を廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従ってください。

各部の名称および製品材質

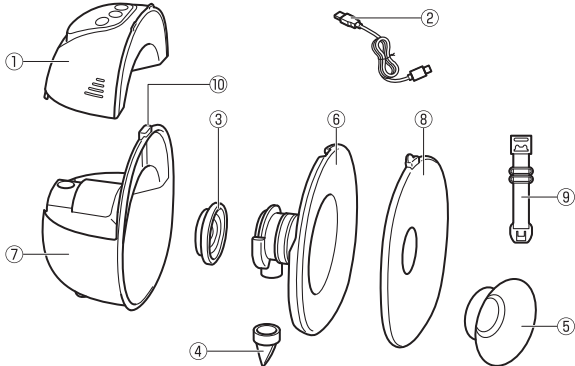

	名称	材質	耐熱温度
①	モーター	電子部品	—
②	USBケーブル		
③	シリンダー	シリコーン	-20℃~200℃
④	バルブ		
⑤	調節リング (18, 20, 22, 24mm)		
⑥	さく乳口	シリコーン・PA	-20℃~120℃
⑦	ミルク容器	PP	-20℃~120℃
⑧	カバー		
⑨	ブラ調節バックル	—	—
⑩	注ぎ口		

操作および表示の説明

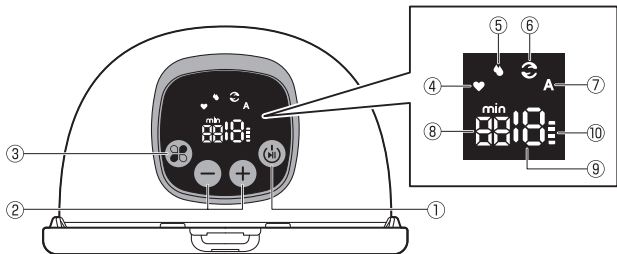



シンボル	名称	操作方法/表示の説明
操作ボタン		
①		スタート/ストップボタン 長押し：電源ON/OFF 短押し：一時停止/再始動
②		レベル調節ボタン 吸引レベルを調節します。 レベルは15段階に調節可能です。 +：1段階強くなる -：1段階弱くなる
③		モード切替ボタン 短押しでモードを切り替えます。起動時は準備モードです。準備モード→さく乳モード→リズムモード→オートモードの順で切り替わり、これをループします。

表示		
④		準備モード さく乳前に胸の状態を整え、準備を行います。
⑤		さく乳モード 通常のさく乳に使用します。
⑥		リズムモード 母乳が出にくいときに使用します。2~3分使用した後、ほかのモードに切り替えるとスムーズにさく乳できます。
⑦		オートモード 胸が張ったり痛みがあるとき、やさしいリズムで徐々にさく乳します。
⑧		使用時間 さく乳を続けている時間を表示します。最初は秒刻み、1分を超えると「min」が表示されて分刻みになります。
⑨		レベル表示 吸引レベルを15段階で表示します。
⑩		バッテリー残量 バッテリー残量を示します。

組立方法

組み立て前に、モーター・USBケーブル・ブラ調節バックル以外の下記の部品の洗浄・消毒を行い、完全に乾燥させてください。
部品が濡れたまま組み立てると、モーターが故障するおそれがあります。
【ミルク容器・シリンダー・バルブ・調節リング・さく乳口・カバー】
洗浄・消毒・乾燥について、詳細は裏面の **お手入れ** をご確認ください。

- ①シリンダーをミルク容器に組み込みます。
- ②バルブとさく乳口を組み立てます。バルブの向きは図に従ってください。
- ③組み立てた②をミルク容器に装着します。さく乳口とミルク容器それぞれの注ぎ口が重なるように位置を合わせ、手で円周をしっかりと押さえて密着させます。
- ④モーターをミルク容器に取り付け、組み立てた部品に隙間などがないか確認します。
- ⑤使用感が合わない場合は、お好みのサイズの調節リングを取り付けサイズを調整してください。

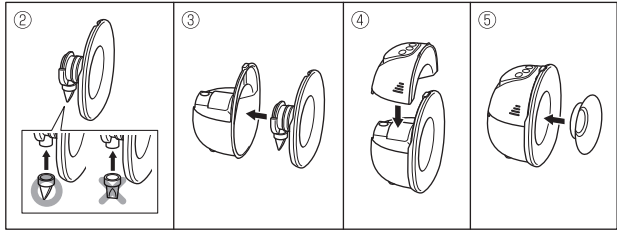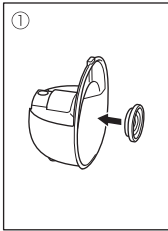

使用方法

<ご使用前>

- ・本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されております。ご使用前に約2~2.5時間充電してください。充電中は表示部のバッテリー残量マークが点滅し、満充電になると消灯します。充電には以下の仕様のUSB充電器をご使用ください。
【入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC5V 1A】
- ・充電部のカバーは引っ張ると破損します。取り扱いには十分ご注意ください。
- ・**組立方法** にしたがって、本製品を正しく組み立ててください。
- ・手と胸を清潔にしてください。
- ・部品に摩耗や損傷がないことを確認してください。


- ①モーターの表示部を上にして、乳首がさく乳口の中心にくるように装着します。空いている手で乳房を支えながら装着すると空気が漏れず密着しやすくなります。本製品は授乳用ブラジャーの下に装着できます。使用中に痛みを感じる場合はより伸縮性のあるブラジャーに変更してください。付属品のブラ調節バックルを使えば長さ調節も可能です。
- ②スタート/ストップボタンを長押しし、電源を入れます。モード切替ボタン・レベル調節ボタンを押してお好きなモード・強さに設定し、さく乳を開始してください。（片側最大10分程度）途中で止めたいとき、再開したいときはスタート/ストップボタンを短押ししてください。ボタン操作や表示について、詳しくは **操作および表示の説明** をご確認ください。
※モーターを動作させた状態で30分経過するとオートオフします。
※本製品にはメモリー機能が搭載されています。電源を再度入れると、自動的に準備モードで起動し、各モードで設定した吸引レベルを記憶しています。

<使用中の姿勢>

背中にクッションを当てるなどして、リラックスした姿勢で少し前かがみになって座ってください。

良い例	悪い例
	

- ③さく乳が終わりましたら、動作させた状態で前傾になりさく乳口に残っている母乳を全てミルク容器に入れてください。スタート/ストップボタンを短押しして一時停止し、乳房から慎重にさく乳器を外してください。
- ④スタート/ストップボタンを長押しして電源を切り、モーターを真上に引き抜くように取り外し、母乳をミルク容器の注ぎ口から哺乳びんなどに移し替えてください。
すぐにご使用にならない場合は、裏面の **母乳の保管方法** を参照して保存してください。
モーターを外さずに本製品を置くときは、必ずモーターを上にして置いてください。寝かせて置くと、モーターが故障するおそれがあります。

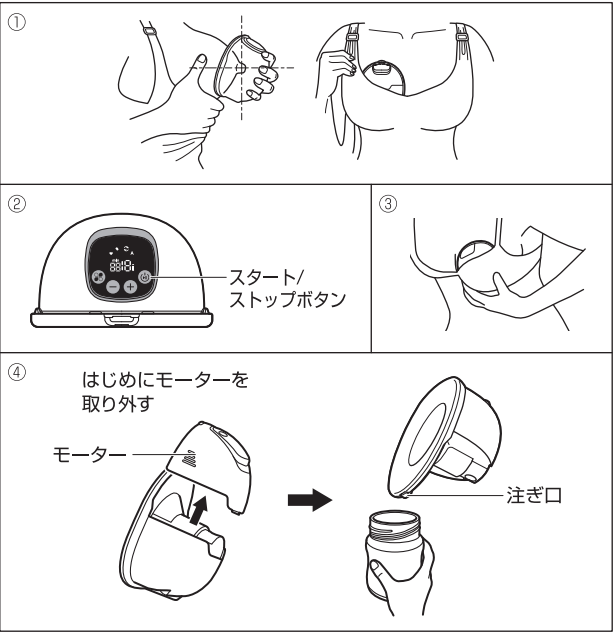

お手入れ

ご使用後はすぐに全ての部品を分解し、お手入れをしてください。

1. モーター・USBケーブル・ブラ調節バックル以外の部品を全て、中性洗剤を使い、やわらかいスポンジでやさしく洗ってください。タワシやブラシなどの硬い素材は、本体にキズがつき、吸引力の低下や破損の原因となるため使用しないでください。
2. 洗淨した部品を、除菌または消毒してください。
 - ・スチーム除菌：お持ちのスチーム除菌器の使用方法に従ってください。
 - ・煮沸消毒：部品が浸る量の水をなべに入れ、10分間を目安に煮沸してください。部品がなべ底に直接触れないよう注意してください。
 - ・薬液消毒：哺乳びん・乳首専用の消毒液に規定時間つけて消毒をします。
3. 清潔な未使用のふきんまたはペーパータオルの上で自然乾燥させてください。
4. 乾燥させた部品を清潔な密閉容器/袋に入れて保管してください。
 - ※ブラ調節バックルは、汚れが気になったら洗濯ネットに入れて洗濯し、陰干ししてください。漂白剤と乾燥機は使用しないでください。
 - ※モーター・USBケーブルは水やその他の液体につけたり、濡らしたりしないでください。液体がついたり濡れたりした場合は、清潔な布で乾拭きしてください。

母乳の保管方法

さく乳後直ちに使用しない場合は冷蔵庫あるいは冷凍庫で保存してください。
母乳は哺乳びんや母乳保存バックに移して保存してください。

	冷蔵保存	冷凍保存
さく乳直後の母乳	24時間以内に使用	3ヶ月以内に使用
解凍後の母乳	24時間以内に使用	再冷凍不可

解凍方法

冷凍庫から冷蔵庫に移して数時間保存するか、ぬるま湯（40℃前後）で湯せんしてください。加熱しすぎると免疫物質が破壊されてしまいます。熱湯や電子レンジでの解凍はおやめください。

こんなときは

- ▼スタート/ストップボタンを押しても動作しない
 - ・電源が入っていることを確認してください。
 - ・電源が入らない場合は充電してください。
- ▼スタート/ストップボタンを押してもカウントが始まらない
 - ・お客様サービスセンターにご連絡ください。
- ▼吸引が弱い/吸引しない
 - ・全ての部品に破損や劣化がなく、正しく組み立てられていること、特にバルブが装着されていることを確認してください。
 - ・さく乳中、さく乳口が乳房に密着していることを確認してください。

製品仕様

製品	ハンズフリー電動さく乳器 Neo E-408
電氣的定格	充電時：DC5V1A 動作時：リチウムイオン充電池3.7v 1200mAh
充電／動作時間	約 2.5～3時間／約 2～2.5時間
電撃保護	内部電源機器 BF 形装着部
電磁両立性	EMC 規格 IEC60601-1-2014 に適合
水の浸入に対する保護	IP22
使用環境温湿度	5～40℃ 15～90%RH（結露なきこと）
保管輸送温湿度	－20～60℃ 15～90%RH（結露なきこと）
サイズ／質量	約 W115mm×D67mm×H135mm／ 約 239g
容量	約 180ml
付属品	USBケーブル（Type-A to C）、 ブラ調節バックル、取扱説明書（本書）、 かんたんガイド

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証書

1. 保証期間はご購入後1年間です。
2. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
3. 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合は、本保証書をご提示の上、お客様サービスセンターにご連絡ください。
4. 保証期間内でも下記の場合は保証の対象とはなりません。
 - (ア) 誤った使用、不注意による故障、または損傷の場合
 - (イ) 保管上の不備・ご使用者様の責によると認められる故障・損傷・紛失の場合
 - (ウ) 分解、改造などを行った場合
 - (エ) 本保証書の提示がない場合、保証書の内容を書き換えられた場合

製品	ハンズフリー電動さく乳器 Neo E-408		
お買い上げ年月日	年	月	日 (保証規定に従ってご購入日より1年間保証いたします)
ご購入者様	お名前 ご住所 電話番号		
販売店様	お名前 ご住所 電話番号		
製造・販売元	シースター株式会社 〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 お客様サービスセンター https://www.seastar.co.jp/contact/		