

永 久 保 存 版

はじめての 鼻水吸引マニュアル


メルシーポット
MerciPot S-503






まずは準備をしましょう

用意するもの

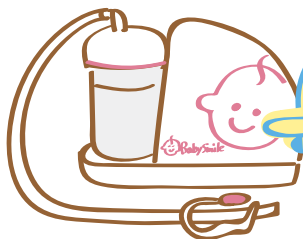

メルシーポット S-503

まず
これと...

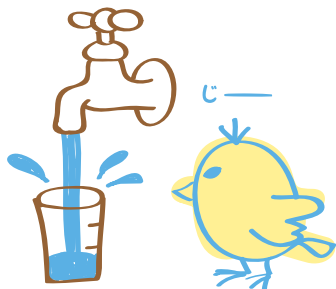

水 (30~50cc)

吸引器の準備

シリコンノズルのつなぎ方



チューブストッパー & チューブ
(ベビちゃんクリップ)



コネクター



できたー!



シリコンノズル



ベビちゃん
クリップの方と
つなげてね

ギザギザの方を
チューブに
さしてね

⚠️ ご注意

ガラス製のオリーブ管は、破裂・破損による
ケガの恐れがあります。鼻水吸引には、
安全なシリコンノズルをお使いください。





鼻水を吸引する前に…

はじめてお子さまの吸引をするときは

まずご自身で吸引してみましょう。
次ページでの吸引方法に従って挿入方法
と吸引の練習をしてください。
自分自身で体験し、感覚をつかむことが
大切です。また、その姿をお子さまが見て
安心してくれます。



※びっくりさせてはいけません。

！ ご注意

感染予防のため、ノズルは1人につき1個ご用意ください。

うまくなつてから見せてあげてね



鼻水吸引の姿勢

幼児の場合



向かい合って座り
片手でお子さまの
後頭部を支え固定
します。

or



寝かせてお子さま
の頭をひざの間に
はさみ固定します。

乳児の場合



ほ乳瓶でミルクを
飲ませる時のよう
に頭を固定しなが
ら押さかかえます。

or




寝かせてお子さま
の頭をひざの間に
はさみ固定します。





鼻水を吸引しましょう

1 スイッチを入れます。

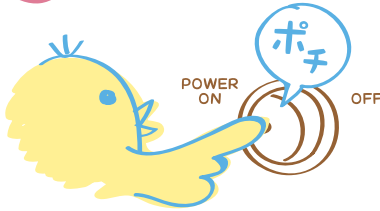

※本体の側面にスイッチがあります。

2 水を 10 ～ 20cc 程度吸引します。




チューブの内側を軽く濡らせばOK

※吸引チューブ内に鼻水がこびりつくのを予防します。


3 シリコンノズルを鼻に挿入し、鼻水を吸引します。



まず、小鼻の横をひっぱって、鼻の穴を広げます。

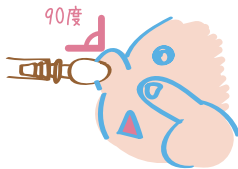

シリコンノズルを顔に対して90度になるように挿しこみます。

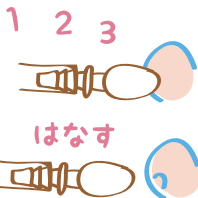

3 ～ 4 秒程度の吸引を何回かに分けて行います。

吸い過ぎ注意!



- ※ 5 秒以上続けて吸引しないでください。
- ※ 鼻の粘膜を傷つけないようやさしく挿しこんでください。
- ※ お子様の様子をよく観察しながら、痛がったり鼻血がでるような時は吸引を中止してください。


鼻水吸引のコツ

POINT

1

『鼻水ポイント』を狙ってシリコンノズルを向けるようにしましょう。

小鼻の上に
『鼻水ポイント』
があるよ。

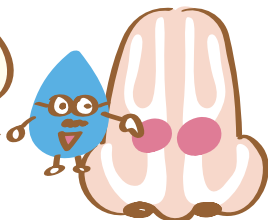

鼻の中は
こんな風に
デコボコ
しているよ。

POINT

2

すっきり吸引できるタイミングで吸引しましょう。



お風呂あがり



スチームで
鼻を温める



温かい食べ物を
食べた直後



※鼻腔があたたまって湿ってくるので吸引しやすくなります！




しっこいネバネバ鼻水に



ベビちゃんクリップを使って手元でらくらく操作！
ネバネバの鼻水も簡単に吸引できます。



ベビちゃんクリップを
5秒ほど指で押さえます。

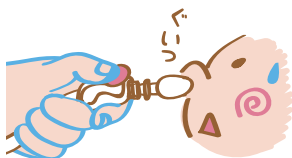

そのまま鼻の穴に
シリコンノズルを入れます。



指を離すと、すっきり鼻水を
吸引することができます。





鼻水の吸引が終わったら

- 1 水を 20～30cc 吸引しスイッチを切ります。



※吸引チューブ内の鼻水を吸引ボトルへ移動させ、きれいにするためです。



お手入れの最後に
アルコール消毒剤を
チューブに通すと
かんたんに消毒できて
早く乾くよ！

- 2 後片付けをしましょう。

取扱
説明書

に従って洗浄し、よく乾燥させます。

最低でも 1 日に 1 度はしっかり洗浄しましょう。

シリコンノズルと
コネクターは
毎回洗浄してください。



え？
なくしたの？



※説明書は大事に保管しましょう。



※必ずよく乾燥させてから保管して
ください。濡れたまま使用すると
故障の原因となります。



食器洗い機をお使いの方へお願い

食器洗い機での洗浄および煮沸消毒は
絶対にしないでください。

メルシーボットの部品は、食器洗い機での洗浄や煮沸消毒により変形します。また、パッキンなどのゴム製品も温度差の激しい環境では劣化が早い傾向がありますので、高温での洗浄・消毒はしないでください。




本体のトラブルを防ぐために 必ず守ってください




煮沸消毒はしないでください。

熱により変形するおそれがありますので、
煮沸や電子レンジでの消毒はしないでください。
(アルコール系消毒液や塩素系消毒液での消毒は可能です。)

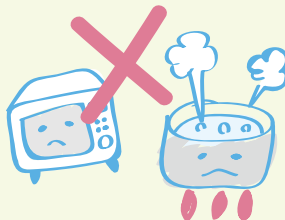

ボトルを本体と接続した状態で回転させないでください。

ボトル内の吸引物や水が本体に入り、
故障の原因となります。


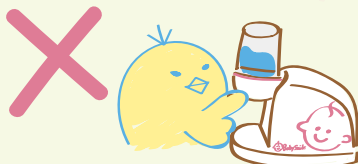


本製品を横に倒したりしないでください。

ボトル内の吸引物や水が本体に入り、
故障の原因となります。



シリコン排水管の向きにご注意ください。

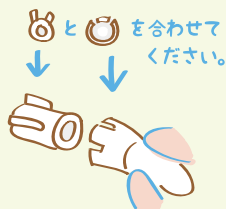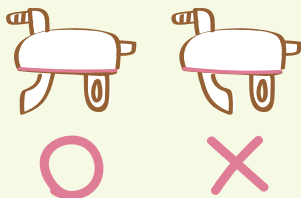



こちらをお読みください



-

ボトルの装着

-



ボトルカバーが
斜めになってないか
確認してください。



最終チェック

※水を吸引する際は MAX ラインを超えないようにご注意ください！

- 1 吸引チューブ、ノズルコネクター、シリコンノズルをしっかりとつないでください。
- 2 ボトルの MAXライン(約270ml) までの水を別の容器にご用意ください。
- 3 約 10 秒ですべての水を吸引できれば吸引力に問題はありません。



Check1



ポンプが作動している音は聞こえますか？

ポンプの作動音が全く聞こえない時は AC アダプターの断線が考えられます。
AC アダプターを新しいものにお取り替えください。
※別途 AC アダプターの購入が必要です。

Check2



フロートが上にあがっていませんか？

フロートが上にあがっていると、上部をふさいで、吸引できなくなることがあります。水分が残っているときに起こりやすい現象なので、よく乾燥させてから使いましょう。

O X



ちよつと
ぐらい
めれてても
いいかと...



Check3



部品は全部そろっていますか？

付属部品が全部そろっているか確認してください。
とくに、ボトルパッキン、ボトルカバー-接続口用 Oリング 2 本などの
付け忘れがあると空気が漏れて吸引できないことがあります。

もしや...
ミニのゴムの
と？



Check4




各部品の接続はきちんとできてますか？

詳しくは取説をご確認ください。

鼻水吸引についての

Q & A

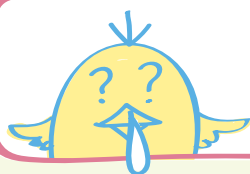


Q

耳に悪くないですか？

A

もう一方の鼻の穴をふさがないようにして吸引をすれば、影響はありません。ただし、両方の鼻が完全につまっている場合には、長く吸引し続けると耳へ負担がかかります。短時間（3～4秒程度）の吸引を何回も繰り返し、左右交互に少しずつ吸引しましょう。

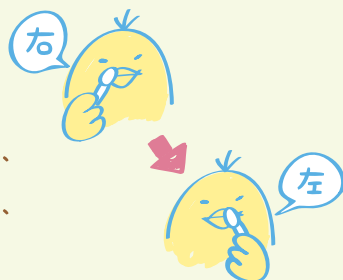

Q

一日に何度も吸って良いの？

A

朝起きた時や、お風呂の後、寝る前など、何度でもこまめに吸ってあげましょう。



Q

鼻水を吸引してはいけない時がありますか？

A

鼻の粘膜が炎症を起こして充血していたり、腫れや傷がある時は使用しないでください。また、鼻血の後には使用しないでください。



Q

鼻水吸引すると何が良いの？


A

赤ちゃんは自分で鼻をかむことができません。メルシーポットならネバネバの鼻水もすっきり吸引できて、呼吸が楽になります。また、のどに流れたり耳に流れるなども防ぐことができます。



Q 吸引力を弱めたい時はどうすればよいですか？

A シリコンノズルで鼻の穴をぴったりふさぐと吸引圧が上がりますが、ふさぐのをやめると吸引圧はすぐに下がります。手元で細かくノズルを動かし、吸引圧を調整してください。

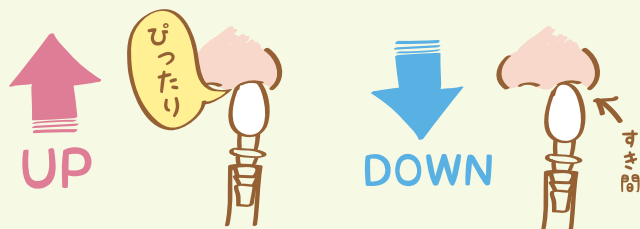

Q 大人も使えますか？

A ママやパパ、大人の方も一緒にお使いいただけます。
※感染予防のため、シリコンノズルは人数分をご用意ください。




Q チューブが長すぎるので切ってもよいですか？

A 吸引力に影響はありませんので、お好みの長さに切ってお使いください。



Q ベビちゃんクリップを使わなくても吸えますか？

A メルシーポット S-503 は鼻水吸引に最適な吸引力に設定されていますので、クリップを使わなくてもしっかり鼻水を吸引できます。

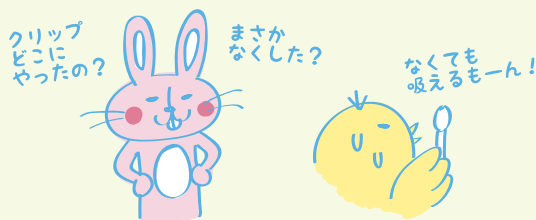



メルシーロボットS-503の
使い方の動画や詳しい情報はコチラ

www.babysmile-info.jp/product/mercipot/s503



ベビースマイル

検索



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F

お客様サービスセンター

☎ 03-4511-8855

(平日9:00~18:00まで 土日祝日を除く)