

## 睡眠時に事故や病気が起きています



赤ちゃんの睡眠時には危険が潜んでいます。乳幼児突然死症候群(SIDS)と呼ばれる赤ちゃんが予兆もなく亡くなってしまう病気や、ベッドからの転落事故、寝具での窒息事故など睡眠時の赤ちゃんは危険と隣り合わせです。異常に気づいた際はいち早く救急車を要請し、蘇生処置を行うことが大切です。

小児科医 河島尚志先生  
東京医科大学病院 小児科・恩春期科  
日本小児科学会認定小児専門医・指導医

## 乳幼児突然死症候群(SIDS)

何の予兆や既往歴もないまま赤ちゃんが、眠っている間に突然死してしまう病気。予防法もいまだ未確立です。

※厚生労働省による「人口動態調査」より  
(対象:平成30年)



原因不明の突然死

## ベッドからの転落事故

0歳児のベビーベッドからの転落事故は、約5年間で151件起きています。ベビーベッドの隙間に頭部が挟まり、窒息死してしまう事故事例も。




※医療機器ネットワーク事業より受けた事故情報を基に消費者庁が特別に精査したデータより  
(対象:平成22年12月から平成29年6月末まで)

## 就寝時の窒息死

0歳児の不慮の事故死のうち全体の32% (160件)が就寝時に起きています。

※消費者庁による「人口動態調査」個別データ分析より  
(対象:平成22年から平成26年まで)

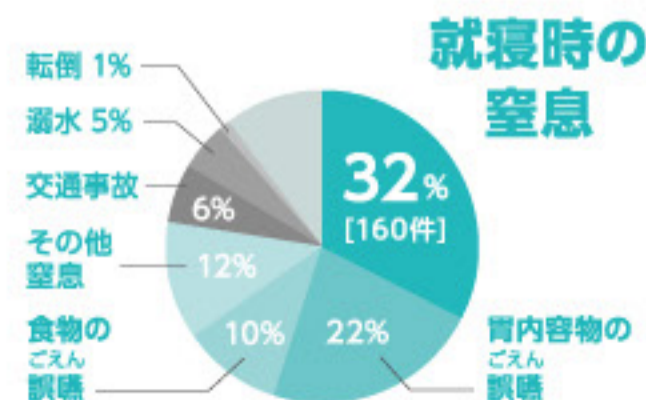

## 製品仕様

- 商品名：乳児用体動センサ ベビーアラーム E-201
- 製品サイズ：センサーパネル/約W280×H300×D12mm  
コントロールユニット/約70×H70×D35mm  
ストラップ/約全長400mm
- 本体重量：センサーパネル/約420g  
コントロールユニット/約61g (電池含まず)  
ストラップ/約4g
- 電源：単3形アルカリ乾電池3本(別売)
- 材質：センサーパネル/PP、  
コントロールユニット/ABS、  
ストラップ/シリコン
- 商品内容：センサーパネル、コントロールユニット、  
ストラップ、取扱説明書兼保証書、添付文書
- 対象年齢：0ヶ月～12ヶ月
- 適応体重：2kg～10kg
- 医療機器届出番号：13B1X10068000203

## ご購入はこちら

Q ベビーアラーム 検索



公式オンラインショップ



楽天市場店



PayPay  
モール店



Amazon

## お客様サービスセンター

☎ 03-4511-8855

(平日9:00～18:00まで 土日祝日を除く)



製造販売元：シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

Tel: 03-6711-5500 Fax: 03-6711-5510

www.seastar.co.jp

E-201-B-04

睡眠時の体動を感知し  
危険をお知らせします



一般医療機器

## 乳児用体動センサ ベビーアラーム E-201



## 新生児から使えます



赤ちゃんの体動を高性能センサーで感知。約20秒間動きがないとアラームが鳴ります。

医療機器届出番号:13B1X10068000203

# 赤ちゃんの異常にいち早く気づけるように

とっても小さい赤ちゃんの寝息。

ぐっすり眠る姿を見て「ちゃんと息しているかな」と不安になったことはありませんか？

万が一何かあったらどうしよう…そんな心配や不安を少しでも軽くするために

ベビーアラームは誕生しました。ご家庭にも病院の安心を。

乳児用体動センサ

## ベビーアラーム E-201

0ヶ月~

新生児からつかえます



### 注意事項

※ベビーアラームは乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防や睡眠障害(睡眠時無呼吸等)の病気の評価に用いる機器ではありません。

※赤ちゃんの状態はベビーアラームによる体動の情報だけで判断せず、必ず保護者や看護者が確認してください。

※ベビーアラームは、呼吸を含む赤ちゃんの体動をセンサーで感知しているため、添い寝やベッドを共有する場合は正しくご使用いただけません。また車のシートやベビーカーなど動いているときの使用はできません。

一般医療機器

医療機器届出番号:  
13B1X10068000203

### POINT 1 高性能センサー搭載

パネルに内蔵されたセンサーは医療機関でも採用されている高性能なセンサーを搭載しています。

### POINT 2 家庭で使える低価格

ベビーヘルスケアをリードする医療機器メーカーだから実現できたこの価格と医療品質をお届けします。

### 使い方はシンプル!



マットレス\*や敷布団の下にセンサーパネルを置いて、電源をON。  
※厚さ6cmまでの固締タイプのマットレス



呼吸や体動を光でお知らせ。約20秒間赤ちゃんの動きがないとアラームが鳴ります。

ご使用いただいた

## みなさまの声

### 気持ちが楽になりました



心配性で毎晩何度も子供の呼吸を確認して気持ちも身体もクタクタでした。これを設置してからは気持ちが楽になり、夜の授乳の合間もしっかり眠れるように! 本当に買って良かったです。

あおいくんママ

### 出産後に急遽購入!



病院で体動センサーを使用していて、家に帰ってから不安で急遽購入しました。使い方はとても簡単で、機械の苦手な私も一人で設置できました。体動センサーは高価だと思っていたので、手の届く価格にも驚きました。

ひまりちゃんママ

### 安心して眠れるように



産院で紹介され、すぐに購入しました。メルシーボットで有名なベビースマイルの製品なので、安心感もあります。使用中は呼吸に合わせて緑のランプが点滅するので、目でも確認できますよ。

リカちゃんママ

※ベビーアラームご購入者様の声

### ベビーアラーム Q&A ??

#### Q. 乾電池の交換時期は?

A. 1日8時間の使用で約1ヶ月を目安に交換してください。

#### Q. マットからはみ出しても大丈夫?

A. 上半身がマット上にある場合は、体動を検知します。