

Non-contact Thermometer  
**Dr.Thermo**

非接触赤外線体温計 ドクターサーモ S-703

 **OXiM**

**非接触**

## 次世代メディカル体温計

こめかみに約1秒かざすだけで、  
素早く衛生的に体温が測定できます。



非接触赤外線体温計 ドクターサーモ S-703



2種類の測定モード



スピード測定



発熱アラーム機能



メモリー機能



バックライト



消音機能

Non-contact Thermometer  
**Dr.Thermo**

非接触赤外線体温計 ドクターサーモ S-703

◆ スピード測定

こめかみにかざして約1秒で体温測定できます。



◆ 測定方法

計測したい物から10cm以内の距離でプローブを向け、プローブ下の「測定スイッチ」を押すと測定できます。




◆ バックライト機能

暗闇で便利なバックライト付き。



◆ 2種類の測定モード

人の体温を測定する「体温計モード」と、水・湯・その他の対象物の温度を測定する「温度計モード」を切り替えて使用することができます。

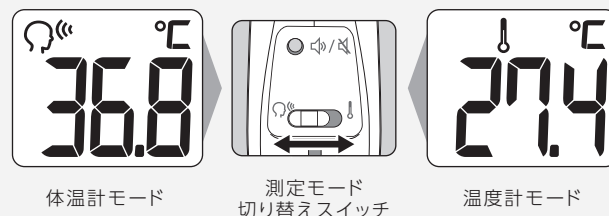

発熱アラーム機能

37.5℃以上感知で、アラーム警告  
(※体温計モード)



メモリー機能

最大9件まで  
測定結果記録可能



消音機能

静かな場所で音を出さずに  
計測ができる消音機能付

◆ 仕様

製品名/型番	ドクターサーモ S-703
一般的名称	皮膚赤外線体温計
医療機器分類	管理医療機器
電源	ボタン電池 CR2032 ×1
電撃保護	内部電源機器 BF形装着部
電池寿命	約3,000回の連続測定、または1日に1~2回の測定 (スタンバイモードも含む)で1年間
自動電源オフ	6秒
測定方式	赤外線式
測定部位	こめかみ
保管環境温湿度	-25℃~55℃、85%RH以下(結露無きこと) 700~1060hPa
測定範囲	体温計モード 34.0℃~42.2℃ 温度計モード(体温以外) 0℃~99.9℃

最大許容誤差	体温計モード ±0.3℃(34.0℃~42.2℃) 温度計モード ±1℃(0℃~99.9℃)
使用環境温湿度	体温計モード 16~40℃、85%RH以下(結露無きこと) 700~1060hPa 温度計モード 10~40℃、85%RH以下(結露無きこと) 700~1060hPa
本体重量	141.5g(電池含まず)
外形寸法	長さ10.4×幅5.2×厚さ15.7 cm
付属品	本体、ストラップ、取扱説明書(品質保証書付)、添付文書、 ボタン電池 CR2032
JANコード	4580211770276
JMDNコード	17888000
医療機器認証番号	227ALBZX00010000

◆都合により外觀・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元:



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F  
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510  
www.seastar.co.jp