

OXi KiDS
FINGER PULSE OXIMETER

OXiM

パルスオキシメータ オキシキッズ



OXi KiDS
FINGER PULSE OXIMETER

明るく見やすい親切設計

- ◆ 小児～成人用モデル
- ◆ マルチアングル機能
- ◆ 有機ELディスプレイ
- ◆ 軽量&長持ち設計

◆ 小児～成人用モデル

こどもの指のサイズに合わせてセンサーの位置を近くし、わずかな脈動でも計測できるよう設計したことで、こどもから成人まで幅広く計測が可能になりました。



指を入れればすぐにON、抜けばOFFの便利なオートパワー設計です。ボタンを押さずにかんたんに測れます。

◆ 有機ELディスプレイ

数値が白く表示される有機ELディスプレイを採用しています。暗いところでも明るく見やすいのが特長です。




◆ 仕様

製品名／型番	オキシキッズ／S-117
医療機器認証番号	226ALBZX00007A04
クラス分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
測定方法	2波長吸光度法
測定範囲	%SpO ₂ 0～100% 脈拍数 30～250bpm (拍／分)
測定精度	%SpO ₂ 70～100% ±2% 脈拍数 30～99bpm ±1bpm 100～250bpm ±1%
使用環境温度	+ 5 ～ +40℃ 結露不可
保管環境温度	-30 ～ +70℃ 結露不可
環境湿度	10 ～ 90%RH 使用時、保管時、結露不可

◆ 診療報酬点数 (平成21年4月1日実施)
経皮的動脈酸素飽和度測定 (1日につき) : 30点、歯科治療総合医療管理料 : 140点

◆ マルチアングル機能

スイッチひとつで表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能を搭載しています。画面の明るさも調節可能で、さまざまなシーンに対応することができます。

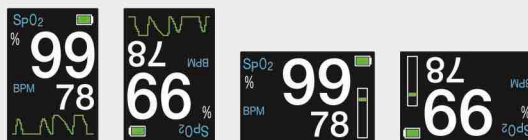

画面の明るさは5段階で調整可能です。

◆ 軽量&長持ち設計

単4電池1本で長持ちする、超省電力設計です。落下時の衝撃を減らし、壊れにくくするため、電池込みでわずか34gと軽量化しました。個人だけでなく、施設や医療機関での利用にも適しています。



使用大気圧環境	700hPa～1013hPa
水の侵入に対する保護の程度	IPX2
電源	単4形アルカリ乾電池(AAA) 1本
外形寸法	縦67.5mm × 横38mm × 高さ25mm
重量	約34g (電池含む)
ディスプレイ	有機ELディスプレイ
EMC	EN60601-1-2:2007に適合
付属品	取扱説明書 (保証書含む)、添付文書、単4形アルカリ乾電池1本
保証期間	1年
JMDNコード	17148010
JANコード	4580211770443

◆都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元:



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp