

パルスオキシメータ オキシリオ S-118

OXi RiO
FINGER PULSE OXIMETER

OXiM

HELLO KITTY

いつもとちょっと違った
大人可愛いハローキティ



充実機能に自分らしさをプラス! 心おどるキュートなデザイン

★ LittleTwinStars ★

可愛いだけじゃない
ナース姿のキキとララ



パルスオキシメータ オキシリオ S-118



有機 EL ディスプレイ



ECO設計




マルチアングル機能

カラーで見やすい有機ELディスプレイ採用

OxiRiO に採用された有機EL ディスプレイは非常に応答速度が速く、刻々と変化する測定値を確実に表示させる信頼性があります。更にディスプレイの視野角は180度に限りなく近く、従来の液晶より容易に測定値を読み取ることができます。




フロントパネルの説明

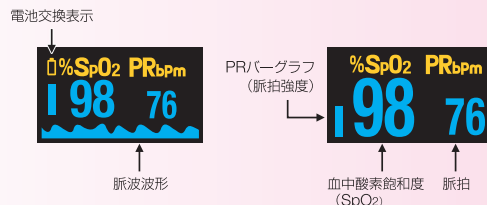

見る方向を選ばないマルチアングル機能

スイッチひとつで画面方向を切り替えて測定値を読み易くするマルチアングルディスプレイを採用しています。脈拍の強さの表示は、波形モード2種と脈拍バーモードの計3モードから選べ、ユーザーニーズに応えます。

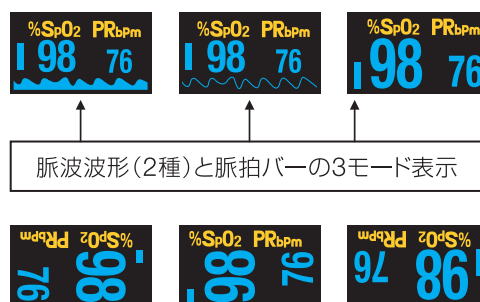

仕様

製品名／型番	オキシリオ S-118
クラス分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
測定方法	2波長吸光度法
測定範囲	%SpO ₂ 0 ~ 100% 脈拍数 30 ~ 250bpm
測定精度	%SpO ₂ 70 ~ 100% ±2% 脈拍数 30 ~ 99bpm ±2bpm 100 ~ 250bpm ±2%
使用環境温湿度	10℃ ~ 40℃, 75%RH 以下 (結露無きこと)
保管環境温湿度	-20℃ ~ 60℃, 95%RH 以下 (結露無きこと)
電源	単4形アルカリ乾電池 2本

外形寸法	長さ 70mm × 幅 37mm × 高さ 32mm
重量	約 60g (電池含む)
ディスプレイ	有機 EL ディスプレイ
EMC	IEC60601-1-2 に適合
付属品	取扱説明書 (保証書含む)、添付文書、単4形アルカリ乾電池 2本
保証期間	1年
医療機器認証番号	226ALBZX00006A02
JMDNコード	17148010
JANコード	オキシリオ S-118 (ハローキティ) 4580211770467 (Little Twin Stars) 4580211770474

■診療報酬点数 (平成21年4月1日実施)
経皮的動脈血酸素飽和度測定 (1日につき) : 30点、歯科治療総合医療管理料 : 140点

■都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元:



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp