

見やすくなって新登場！

Brand New パルスオキシメータ



**OXiシリーズ**  
FINGER PULSE OXIMETER

高機能 × 高品質

- ◆ 高い測定精度
- ◆ マルチアングル機能
- ◆ 有機ELディスプレイ & ECO設計
- ◆ 軽量コンパクト

# OXiシリーズ

FINGER PULSE OXIMETER

## ◆ ECO設計

指を入れると測定を開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。

※約8秒間数値を表示した後電源が切れます。



測定イメージ

## ◆ 有機ELディスプレイ

数値が白く表示される有機ELディスプレイを採用しています。暗いところでも明るく見やすいのが特長です。



## ◆ 仕様


|          |                                         |                 |       |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|-------|
| 製品名／型番   | [販売名]<br>オキシシリーズ S-126 230ALBZX00003000 |                 |       |
| 医療機器認証番号 |                                         |                 |       |
| クラス分類    | 管理医療機器、特定保守管理医療機器                       |                 |       |
| 測定方法     | 2波長吸光度法                                 |                 |       |
| 測定範囲     | SpO <sub>2</sub>                        | 70～100%         |       |
|          | 脈拍数                                     | 30～250bpm (拍／分) |       |
| 測定精度     | SpO <sub>2</sub>                        | 0～69%           | 規定しない |
|          |                                         | 70～100%         | ±2%   |
|          | 脈拍数                                     | 30～99bpm        | ±2bpm |
|          |                                         | 100～250bpm      | ±2%   |
| 使用環境温度   | +5～+40℃                                 | 結露不可            |       |
| 保管環境温度   | -25～+70℃                                | 結露不可            |       |
| 使用環境湿度   | 15～93%RH                                | 結露不可            |       |
| 保管環境湿度   | 93%RH以下                                 | 結露不可            |       |

◆診療報酬点数(平成21年4月1日実施)  
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき): 30点、歯科治療総合医療管理料: 140点

## ◆ マルチアングル機能

スイッチひとつで表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能を搭載しています。

画面の明るさも調節可能で、さまざまなシーンに対応することができます。

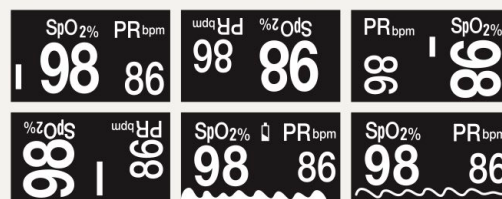

画面の明るさは10段階で調整可能です。

## ◆ 軽量&高機能

電池を入れた状態で、約55gの軽量モデルです。医療現場での使用を想定した、高い測定精度と広い測定範囲を兼ね備えています。



|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用大気圧環境       | 700hPa～1060hPa                                                                         |
| 水の浸入に対する保護の程度 | IP22                                                                                   |
| 電源            | 単4形アルカリ乾電池(AAA) 2本                                                                     |
| 外形寸法          | 縦60mm × 横32.5mm × 高さ29.9mm                                                             |
| 重量            | 約55g(電池含む)                                                                             |
| ディスプレイ        | 有機ELディスプレイ                                                                             |
| EMC           | IEC60601-1-2:2014に適合                                                                   |
| 付属品           | 取扱説明書(保証書含む)、添付文書、単4形アルカリ乾電池2本                                                         |
| 保証期間          | 1年                                                                                     |
| JMDNコード       | 17148010                                                                               |
| JANコード        | オキシボーイ／S-126 4580211770825<br>オキシガール／S-126 4580211770832<br>オキシヤング／S-126 4580211770849 |

◆都合により外觀・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元:



シースター株式会社

[関西支店] Tel: 077-531-0990 Fax: 077-531-1300

[本社] Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510

www.seastar.co.jp