

選べる 5 COLOR

あなただけのパルスオキシメータ



OXi GIRL



OXi BOY



OXi FRESH



OXi YOUNG



OXi ROSA

OXi SERIES
FINGER PULSE OXIMETER

高機能 × 高品質


- ◆ 高い測定精度
- ◆ マルチアングル機能
- ◆ 有機ELディスプレイ & ECO設計
- ◆ 軽量コンパクト

OXiシリーズ

FINGER PULSE OXIMETER

◆ 高い測定精度

クリップ部分にフィンガーガイドを付けることで、正しい指の位置で測定することが可能。
高い測定精度と広い測定範囲を兼ね備えています。

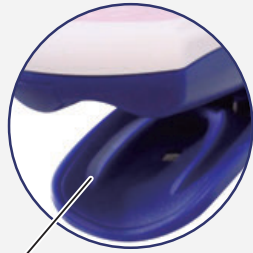

フィンガーガイド

※ SpO₂ 測定精度および脈拍数測定精度は、ISO 80601-2-61
『パルスオキシメータ機器の基礎安全および基本性能の個別要求事項』
に準拠しています。

◆ 有機ELディスプレイ&ECO設計

数値が白く表示される有機ELディスプレイを採用。暗いところでも明るく見やすいのが特長です。

指を入れると測定を開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。



※約7秒間数値を表示した後電源が切れます。


◆ 仕様

製品名/型番	オキシフレッシュ S-119 226ALBZX00007A05
医療機器認証番号	オキシボーイ S-121 226ALBZX00007A06 オキシガール S-122 226ALBZX00007A07 オキシヤング S-123 226ALBZX00007A08 オキシローザ S-125 226ALBZX00007A09
クラス分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
測定方法	2波長吸光度法
測定範囲	%SpO ₂ 0~100% 脈拍数 30~250bpm (拍/分)
測定精度	%SpO ₂ 0~69% 70~100% ±2% 脈拍数 30~99bpm ±1bpm 100~250bpm ±1%
使用環境温度	+5 ~ +40℃ 結露不可
保管環境温度	-30 ~ +70℃ 結露不可
環境湿度	10 ~ 90%RH 使用時、保管時、結露不可

◆診療報酬点数(平成21年4月1日実施)
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき): 30点、歯科治療総合医療管理料: 140点

◆ マルチアングル機能


スイッチひとつで表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能を搭載しています。
画面の明るさも調節可能で、
さまざまなシーンに対応することができます。

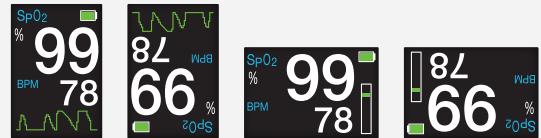

画面の明るさは5段階で調整可能です。

◆ 軽量コンパクト

電池を入れた状態で、35gの軽量モデルです。
コンパクトサイズで携帯に適しています。

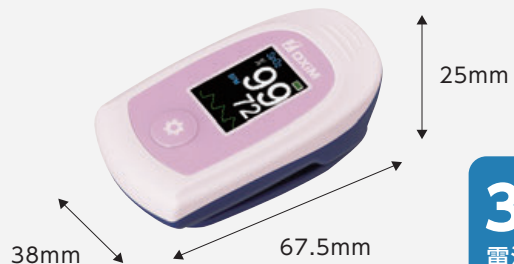

使用大気圧環境	700hPa~1013hPa
水の浸入に対する保護の程度	IPX2
電源	単4形アルカリ乾電池(AAA) 1本
外形寸法	縦67.5mm × 横38mm × 高さ25mm
重量	約26g(電池を含まず)
ディスプレイ	有機ELディスプレイ
EMC	EN60601-1-2:2007に適合
付属品	取扱説明書(保証書含む)、添付文書、 単4形アルカリ乾電池1本
保証期間	1年
JMDNコード	17148010
JANコード	オキシフレッシュ S-119 4580211770481 オキシボーイ S-121 4580211770511 オキシガール S-122 4580211770528 オキシヤング S-123 4580211770535 オキシローザ S-125 4580211770542

◆都合により外觀・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元:



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp