

画面が見やすい人気モデル!

白黒表示で、くっきり見える



血中酸素飽和濃度・脈拍測定器

パルスオキシメータ

オキシシリーズ S-126

高機能 × 高品質

- ◆ 有機ELディスプレイ & ECO設計
- ◆ マルチアングル機能
- ◆ 高い測定精度
- ◆ 軽量コンパクト

◆ECO設計


指を入れてボタンを押すと測定を開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。



測定イメージ

◆マルチアングル機能

スイッチひとつで表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能を搭載しています。画面の明るさも調節可能で、さまざまなシーンに対応することができます。

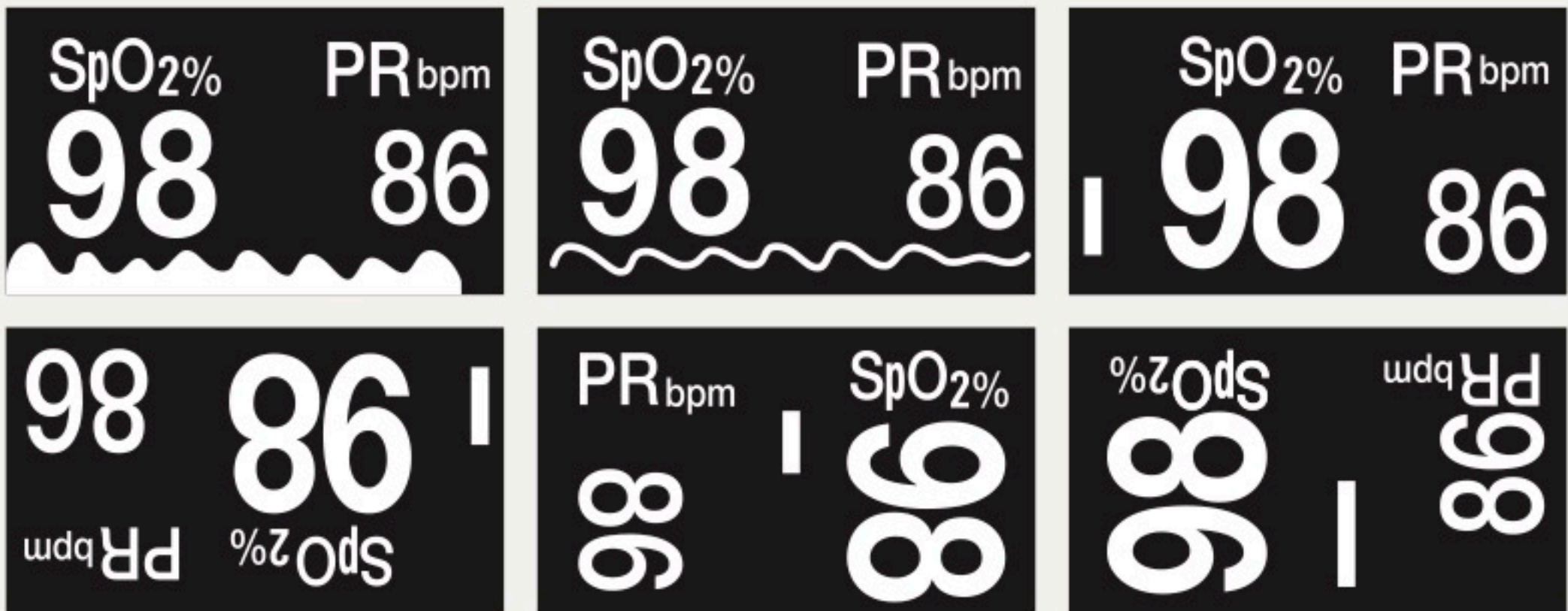

画面の明るさは10段階で調整可能です。


◆有機ELディスプレイ

数値が白く表示される有機ELディスプレイを採用しています。暗いところでも明るく見やすいのが特長です。



◆軽量&高機能

電池を入れた状態で、約55gの軽量モデルです。医療現場での使用を想定した、高い測定精度と広い測定範囲を兼ね備えています。

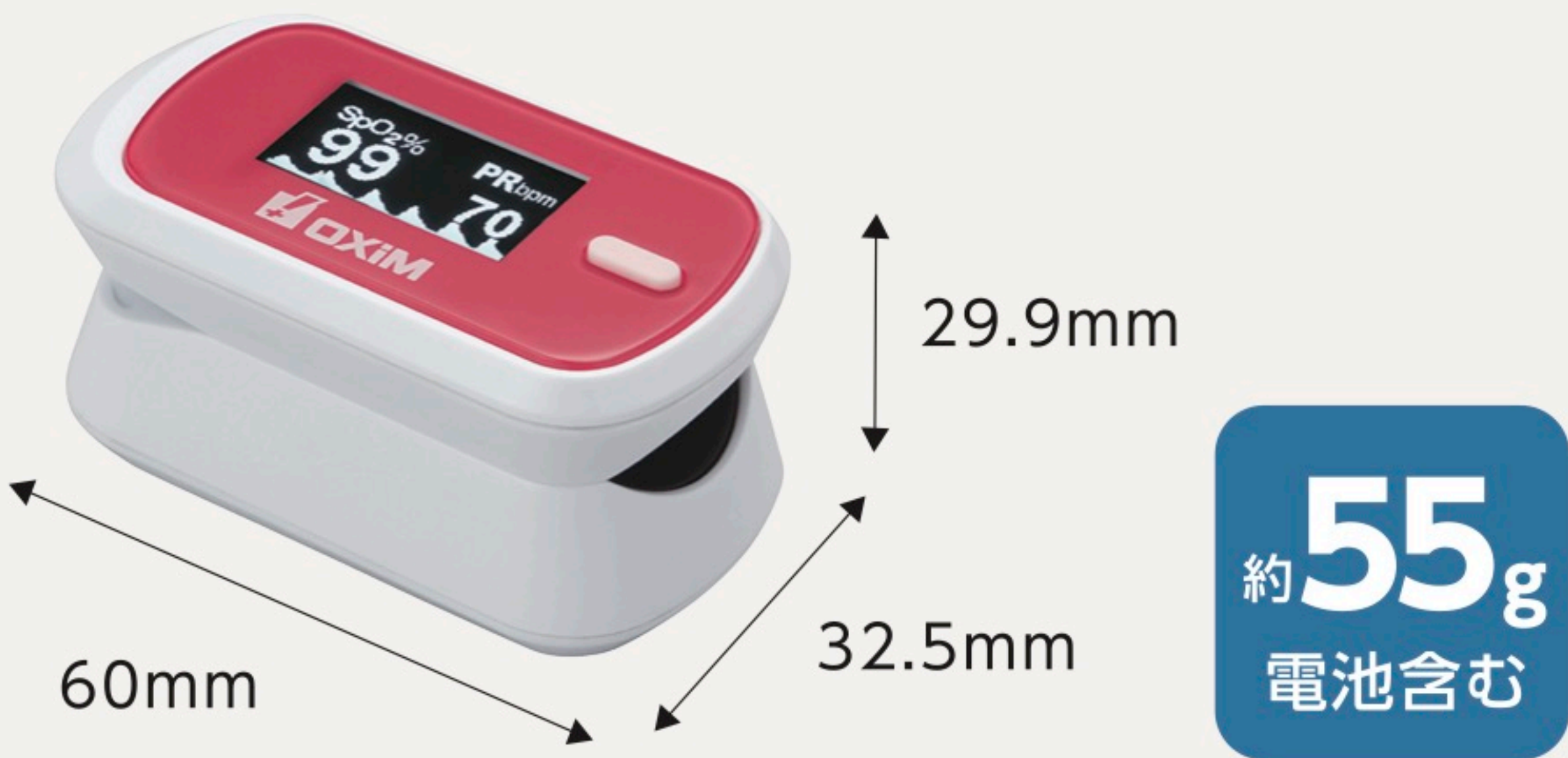

◆仕様

製品名／型番 医療機器認証番号	〔販売名〕 オキシシリーズ S-126 230ALBZX00003000		
クラス分類 測定方法	管理医療機器、特定保守管理医療機器 2波長吸光度法		
測定範囲	SpO ₂	70～100%	
	脈拍数	30～250bpm(拍／分)	
測定精度	SpO ₂	0～69%	規定しない
		70～100%	±2%
	脈拍数	30～99bpm	±2bpm
		100～250bpm	±2%
使用環境温度	+ 5 ～ +40℃	結露不可	
保管環境温度	-25 ～ +70℃	結露不可	
使用環境湿度	15～93%RH	結露不可	
保管環境湿度	93%RH以下	結露不可	

使用大気圧環境	700hPa～1060hPa
水の浸入に対する保護の程度	IP22
電源	単4形アルカリ乾電池(AAA) 2本
外形寸法	縦60mm × 横32.5mm × 高さ29.9mm
重量	約55g(電池含む)
ディスプレイ	有機ELディスプレイ
EMC	IEC60601-1-2:2014に適合
付属品	取扱説明書(保証書含む)、添付文書、 単4形アルカリ乾電池2本
保証期間	1年
JMDNコード	17148010
JANコード	オキシボーイ／S-126B 4580211770825 オキシガール／S-126G 4580211770832 オキシヤング／S-126Y 4580211770849

◆診療報酬点数(令和2年4月時点)
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき): 30点、歯科治療時医療管理料: 45点

◆都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元:



シースター株式会社

〔本社〕〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階
TEL: 03-6711-5500 FAX: 03-6711-5510
〔山口事業所〕〒754-0894 山口県山口市佐山字産業団地南1200番16
TEL: 083-976-6570 FAX: 083-976-6560
www.seastar.co.jp